



BEATE JOHNEN
SKINLIKE

BEATE JOHNEN IRON

FACE AND BODY SKIN CARE

Handbuch







Liebe Skinlikerinnen und Skinliker,

mit dem BEATE JOHNEN IRON haben Sie sich für eine umfassende Haut- und Körperpfegelösung in einem Gerät entschieden. Das BEATE JOHNEN IRON ist ein Homecare-Beauty-Gerät, welches die Haut dabei unterstützt, wichtige Nährstoffe aufzunehmen und Verunreinigungen aus der Haut abzuführen. Es verwendet Pole negativer sowie positiver Ionen, um Kosmetika zu ionisieren und wirksame Bestandteile besser in die Haut einzuschleusen. Das BEATE JOHNEN IRON unterstützt dabei, die Augenkontur optisch anzuheben und zu straffen, ein Doppelkinn optisch zu minimieren und Falten sichtbar zu reduzieren. Die gesamte Gesichtskontur wird optisch gestrafft und geglättet und die Haut erhält ihre strahlende Jugendlichkeit zurück. Die Hautelastizität wird merklich verbessert, die Körperkonturen werden sichtbar optimiert und Sie erhalten eine optisch definierte Körpersilhouette.

Profitieren Sie von diesem umfangreichen Gerät höchster Qualität und bügeln Sie Ihre Haut Zuhause sichtbar glatt.

Viel Freude und Erfolg
bei der Anwendung
Wünscht herzlichst Ihre



BEATE JOHNEN IRON | FACE AND BODY SKIN CARE


6 Wege zur perfekten Haut	6
Lieferumfang	7
Aufbau und Bedienelemente	8
Gerätefunktionen	9
Inbetriebnahme des Gerätes	10
Modus: Gesichtsmassage – erste Schritte	12
Massagepunkte im Gesicht	13
Modus: Körpermassage – erste Schritte	14
Massagepunkte am Körper	15
Akku/Ladezeit	16
Sicherheits- und Warnhinweise	18
Rücknahme und Entsorgung	19

6 WEGE ZUR PERFEKTEN HAUT



Vibration

Mikrovibrationsmassage für eine verbesserte Wirkung.

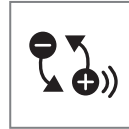

Gesichtspflege

Mikrostrom zur Stimulierung und Behandlung der Gesichtshaut.




Wärmemassage

Hilft, die Poren zu öffnen und die Funktion zu verbessern.




Körperpflege

Mikrostrom zur Stärkung und Behandlung der Körperhaut.

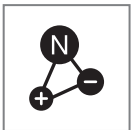

Nährstoffversorgung

Unterstützt die Tiefenwirkung von Kosmetika in der Haut.

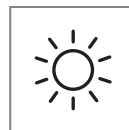

LED Light Care

LED-Lichttherapie zur Stärkung und Unterstützung der Haut.

LIEFERUMFANG

Ihr BEATE JOHNNEN IRON umfasst folgenden Lieferumfang:

1. Halterung
2. Ladegerät
3. Handbuch
4. Handgerät




AUFBAU UND BEDIENELEMENTE



Technische Daten

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| • Bewertung: DC 3.6V 2.600 mA | • Ausgangsleistung: 8 Watt | • Akkulaufzeit: ca. 80 Minuten |
| • Größe (L×H×B): 215×72×61 mm | • Gewicht: 130 g | • Batterieladezeit: 3 Stunden |

GERÄTEFUNKTIONEN

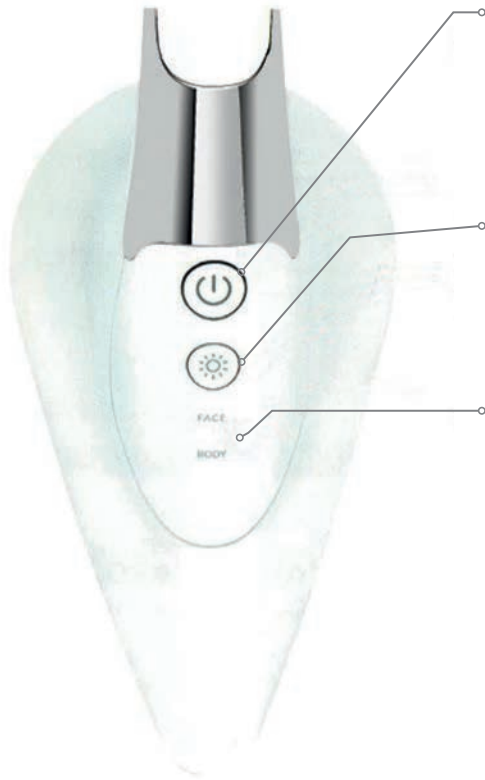

1. Ein- und Ausschaltknopf

(EIN: Den Knopf drei Sekunden gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten. AUS: Den Knopf länger gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten)

2. Wärmetaste

Die Empfindung der Wärmefunktion kann von Person zu Person variieren und somit von jedem unterschiedlich empfunden werden. Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Wärme auf Ihrer Handfläche.

3. Statusanzeige

Lichtanzeige für den Face und Body Modus.

Die verschiedenen Modi und Intensitätsstufen können durch einmaliges Drücken der Ein-/Ausschalttaste ausgewählt werden.

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen wurde.
2. Verwenden Sie das BEATE JOHNEN IRON nach dem Auftragen der Gesichts- bzw. Körperpflege.
3. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn das Ladegerät angeschlossen wird.



Einschalten des Gerätes

Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf für drei Sekunden gedrückt, um das Gerät zu starten. Vibration, Mikrostrom und LED-Lichttherapie werden automatisch eingeschaltet.



Vibrationsfunktion

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste um zwischen dem Face und Body Modus sowie den beiden Intensitätsstufen zu wählen.

- | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------------|
| 1x drücken: | Modus Gesicht | Intensität 1 (blaue Kontrollleuchte) |
| 2x drücken: | Modus Gesicht | Intensität 2 (rote Kontrollleuchte) |
| 3x drücken: | Modus Körper | Intensität 1 (blaue Kontrollleuchte) |
| 4x drücken: | Modus Körper | Intensität 2 (rote Kontrollleuchte) |



Zuschalten der Wärmefunktion

Schalten Sie die Wärmefunktion durch Drücken des Wärmeknopfes an. Die Wärmefunktion unterstützt das Öffnen und Erweitern der Poren und lässt Wirkstoffe aus der Pflege besser und tiefer in die Haut eindringen.

- 1x drücken: 40 Grad Celsius (Wärmeknopf leuchtet grün)
- 2x drücken: 45 Grad Celsius (Wärmeknopf leuchtet gelb)
- 3x drücken: 50 Grad Celsius (Wärmeknopf leuchtet rot)

Die Wahrnehmung der Wärme kann von Person zu Person variieren. Prüfen Sie vor Gebrauch - an Ihrem Handrücken - welcher Wärmegrad Ihnen zusagt.

Je nach Hauttyp sollten Sie den Vorgang mindestens 2x wiederholen.

Ausschalten des Gerätes

Wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter einige Sekunden gedrückt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät automatisch nach 5 Minuten ab.

MODUS: GESICHTSMASSAGE



1. Bevor Sie das Gerät benutzen, tragen Sie eine Gesichtspflege auf. Es wird eine Anwendungsdauer von 5 Min. empfohlen. Anschließend schaltet sich das Gerät automatisch ab.



2. Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf für 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten und den Gesichtsmodus zu aktivieren.



3. Für eine stärkere Intensität drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf erneut (siehe Seite 10).



4. Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf länger gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

MASSAGEPUNKTE IM GESICHT



Hinter dem Ohr: Das Gerät hinter dem Ohr ansetzen und gleichmäßig auf und ab führen.



Hals: Das Gerät am Hals ansetzen und gleichmäßig auf und ab führen.



Gesichtskontur: Setzen Sie das Gerät am Kinn an und bewegen Sie es auf und ab.



Stirn: Das Gerät an der Stirn ansetzen und von links nach rechts hin und her führen.

MODUS: KÖRPERMASSAGE



1. Tragen Sie eine Körperpflege auf Ihre Körperhaut auf. Es wird eine Anwendungsdauer von 5 Min. empfohlen. Anschließend schaltet sich das Gerät automatisch ab.



2. Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf für drei Sekunden. Aktivieren Sie den Körpermodus durch erneutes zweimaliges Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes.



3. Für eine stärkere Intensität drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf erneut (siehe Seite 10).



4. Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf länger gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

MASSAGEPUNKTE AM KÖRPER



Achseln: Führen Sie das Gerät von der Schulter zur Achselhöhle in schwingenden Bewegungen auf und ab.



Arm: Starten Sie vom inneren Oberarm und führen Sie das Gerät weiter bis zum Ellenbogen vor und zurück.




Bauch: Führen Sie das Gerät in schwingenden Bewegungen vom oberen Bauchbereich zum unteren Bauchbereich auf und ab.



Taille: Führen Sie das Gerät in schwingenden Bewegungen an der Taille auf und ab.



Oberschenkel: Führen Sie das Gerät in gleichmäßigen Bewegungen an Ihrem Oberschenkel auf und ab.

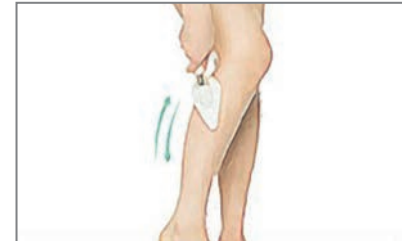

Unterschenkel: Führen Sie das Gerät in kreisenden Bewegungen an Ihrem Unterschenkel auf und ab.

AKKU/LADEZEIT



Ladegerät



Anschluss des Ladegeräts

Bitte laden Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig auf.

Während des Ladens

Nach Anschluss des Ladekabels ist ein rotes Licht am Gerät sichtbar. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist und das Gerät vollständig aufgeladen wurde, erscheint ein blaues Licht am Gerät. Das Abziehen des Ladekabels führt automatisch zur Unterbrechung des Ladevorgangs.

Wenig Akku

Das rote Lämpchen leuchtet.

Voller Akku

Das Produkt kann für ca. 80 Min. angewendet werden. (Lithium Batterie 3.6v/2.600mAh). Bitte laden Sie das Gerät immer vollständig auf, bevor Sie es nutzen.

Die Einhaltung der Ladevorgänge verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Adapter-Eingang:

C100V-240V 50/60Hz

Adapter-Ausgang:

DC 5V=1.0A

Adapter kann je nach Land variieren.



SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Bitte lesen Sie vor der ersten Anwendung sorgfältig die Bedienungsanleitung.
- Nutzen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig geladen ist.
- Benutzen Sie immer den dazugehörigen Adapter.
- Entfernen Sie immer Ihre Schmuckstücke vor der Anwendung.
- Wenden Sie das Gerät nicht auf Narben oder Wunden an.
- Nutzen Sie das Gerät nicht auf zu Allergien oder anderen Hautproblemen neigender Haut. Lassen Sie sich ggf. vor der Anwendung von einem Arzt beraten. Bei Hautrötungen, Schwellungen oder Juckreiz gilt es, die Anwendung sofort einzustellen und ggf. einen Arzt zu konsultieren.
- Nutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, unter der Dusche oder beim Baden.
- Achten Sie immer darauf sich nicht zu verbrennen.
- Vermeiden Sie einen Fall oder ein Runterwerfen.
- Erkennen Sie irgendeinen Defekt am Gerät oder eine fehlerhafte Funktion, so wenden Sie sich umgehend an den Hersteller.
- Das Produkt ist nicht für Schwangere oder Kinder geeignet und sollte für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Bitte schalten Sie das Gerät nach der Nutzung aus. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät innerhalb von 5 Minuten aus.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Max. bei Zimmertemperatur lagern, sonst droht Überhitzungsgefahr. Wenn das Gerät eine Temperatur von 55° übersteigt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Nach dem vollständigen Laden bewahren Sie das Gerät sicher und geschützt auf.
- Das Produkt ist nicht wasserfest. Reinigen Sie es mit einem sauberen und trockenen Tuch und nicht unter fließendem Wasser.
- Bitte reinigen Sie die Wärmefläche nach jeder Anwendung.

Symbole und Zeichen



Achtung! Gebrauchsanweisung und weitere Begleitdokumente beachten.



CE-Zertifizierung



Seriennummer



Achtung!
Heiße Oberfläche



Von Kindern
fernhalten

Nutzung ausschließlich in trockenem und staubfreiem Umfeld.

RÜCKNAHME UND ENTSORGUNG



Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten, die Batterien (Akkumulatoren) enthalten, weisen wir Sie gemäß §18 Abs. 1 des Batteriegesetzes (BattG) auf Folgendes hin:

Durch das Mülltonnensymbol werden schadstoffhaltige Batterien gekennzeichnet sowie der Umstand, dass Batterien nicht über den Hausmüll, sondern fachgerecht entsorgt werden müssen.

Altgeräte/Batterien dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Da sich in Ihrem Gerät ein Akkumulator befindet, entsorgen Sie bitte das gesamte Gerät fachgerecht. Bitte öffnen Sie das Gerät nicht. Auch der Hersteller ist zur Rücknahme des Gerätes verpflichtet.



BEATE JOHNNEN
SKINLIKE

BEATE JOHNNEN GMBH COSMETICS
KIRCHPLATZ 1, D-82049 PULLACH IM ISARTAL
WWW.BEATEJOHNNEN.DE