



BEATE JOHNNEN
SKINLIKE

BEATE JOHNNEN 6 IN 1 BEAUTY MAKER

FACE AND BODY SKIN CARE

Handbuch





Liebe Skinlikerinnen und Skinliker,

mit dem BEATE JOHNEN 6 IN 1 BEAUTY MAKER haben Sie sich für eine umfassende Haut- und Körperpflegelösung in einem Gerät entschieden. Der BEATE JOHNEN 6 IN 1 BEAUTY MAKER ist ein Homecare-Beauty-Gerät, das Sie dabei unterstützt, Falten optisch zu reduzieren und die Gesichtskonturen optisch zu straffen. Die Haut erstrahlt in Jugendlichkeit.

Viel Freude und Erfolg bei der Anwendung
Wünscht herzlichst Ihre

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Beate Johnen'. The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.



BEATE JOHNEN 6 IN 1 BEAUTY MAKER | FACE AND BODY SKIN CARE

Sicherheits- und Warnhinweise	6
Rücknahme und Entsorgung	7
Anwendungshinweise	8
Lieferumfang	9
Aufbau und Bedienelemente	10
Produktspezifikation	11
Akku/Ladezeit	11
Gerätefunktionen	12
Verwendung des 6 in 1 Beauty Makers	15
Programm Radiofrequenz RF & Wärmetherapie	16
Programm Iontophorese ION+	17
Programm Iontophorese ION-	18
Programm Elektro-Muskuläre-Stimulation EMS	19
Programm Lichttherapie	20
Programm Kältetherapie	21
Reinigung	22
Anwendung im Gesicht	22
Anwendung am Körper	23

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den kosmetischen Heimgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Wenn Sie etwas Ungewöhnliches am Gerät, seiner Funktion oder an der Haut feststellen, stoppen Sie die Anwendung und schalten das Gerät aus.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät und verbinden Sie es ordnungsgemäß mit der Haushaltssteckdose, um Fehlfunktionen oder Überhitzung zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie vor Gebrauch die Intaktheit des Geräts sicher. Sollten Sie einen Defekt am Gerät oder Ladegerät feststellen können, verwenden Sie es nicht, um Stromschläge, Kurzschlüsse o.Ä. zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Ladegerät ausschließlich im Spannungsbereich von 100-240V.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer und hohen Temperaturen aus.
- Erkennen Sie irgendeinen Defekt am Gerät oder eine fehlerhafte Funktion, so wenden Sie sich umgehend an den Hersteller.
- Die enthaltene und fest verbaute Batterie des Geräts kann sich bei unsachgemäßem Gebrauch stark erwärmen oder verformen. Verwenden Sie das Gerät nicht, sollte es sich plötzlich stark erhitzen oder verformen.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht in Zusammenhang mit Wasser, um Stromschläge, Kurzschlüsse o.Ä. zu vermeiden
- Öffnen Sie das Gerät nicht, dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Vermeiden Sie das Herunterfallen des Geräts, dies kann zu Beeinträchtigung der Funktionen führen.
- Bitte laden Sie das Gerät alle drei Monate einmal auf, wenn Sie es länger nicht benutzen.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Symbole und Zeichen



Achtung! Gebrauchsanweisung und weitere Begleitdokumente beachten.



CE-Zertifizierung



Seriennummer



Von Kindern
fernhalten

Nutzung ausschließlich in trockenem und staubfreiem Umfeld.

RÜCKNAHME UND ENTSORGUNG



Durch das Mülltonnensymbol werden schadstoffhaltige Batterien gekennzeichnet sowie der Umstand, dass Batterien nicht über den Hausmüll, sondern fachgerecht entsorgt werden müssen.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten, die Batterien (Akkumulatoren) enthalten, weisen wir Sie gemäß §18 Abs. 1 des Batteriegesetzes (BattG) auf Folgendes hin:

Altgeräte/Batterien dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Da sich in Ihrem Gerät ein Akkumulator befindet, entsorgen Sie bitte das gesamte Gerät fachgerecht. Bitte öffnen Sie das Gerät nicht. Auch der Hersteller ist zur Rücknahme des Gerätes verpflichtet.

ANWENDUNGSHINWEISE

- Wenden Sie das Gerät nicht an, wenn Sie herzkrank sind oder einen Herzschrittmacher haben.
- Wenden Sie das Gerät nicht an, wenn Sie schwanger sind oder sein könnten.
- Wenden Sie das Gerät nicht auf Wunden oder krankhaftem Hautgewebe an.
- Wenden Sie das Gerät nicht auf den Augen oder extrem dicht an den Augen an.
- Es ist normal, dass sich die Haut nach den ersten Behandlungen mit dem Beate Johnen 6 in 1 Beauty Maker etwas trocken anfühlen kann. Das Gefühl sollte nach einigen Anwendungen nachlassen.

LIEFERUMFANG

Ihr BEATE JOHNNEN 6 IN 1 BEAUTY MAKER umfasst folgenden Lieferumfang:

1. Handgerät mit Metallring und Abdeckung
2. Ladegerät
3. Handbuch



2.



1.



AUFBAU UND BEDIENELEMENTE



PRODUKTSPEZIFIKATION

Name: Beate Johnen 6 in 1
Beauty Maker

Adapter-Eingangsspezifikationen:
100-240V~50/60Hz 0.25A

Adapter-Ausgangsspezifikationen:
9V==650mA

Li Batterie: 700mAh/7.4V

Batterieladezeit: etwa 3 Stunden

Akkulaufzeit: 2 Stunden

RF: 1 MHz

Wellenlänge:
rote LED 630nm ± 10 nm
grüne LED 525 nm ± 10 nm
blaue LED 468 nm ± 10 nm

Größe (LxBxH):
7,2 x 5,4 x 17,8 cm

Gewicht: 269g

AKKU/LADEZEIT




Anschluss des Ladegeräts

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie das mitgelieferte Ladekabel hierzu mit Ihrer Steckdose.

Wenn das Produkt aufgeladen wird, leuchtet das Display des Geräts auf und der Energiebalken blinkt. Sobald der Energiebalken nicht mehr blinkt, ist das Gerät vollständig aufgeladen. Das vollständige Aufladen dauert etwa drei Stunden.


Die Einhaltung der Ladevorgänge verlängert die Lebensdauer der Batterie.

GERÄTEFUNKTIONEN

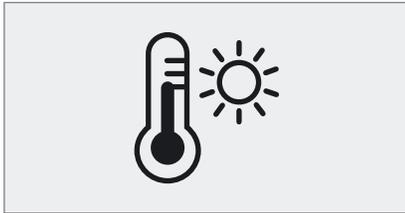

RADIOFREQUENZ RF & WÄRMETHERAPIE


Mit der in den Programmen ION+, ION- und EMS optional zuschaltbaren kosmetischen Radiofrequenz (RF) Technologie werden Radiowellen in die Haut geschleust. Die Energie der Radiofrequenz und die entstehende Wärme können die Neubildung von Kollagen und Elastin fördern. Fältchen und kleine Linien können optisch geglättet werden, sodass das Hautbild straffer und glatter erscheint.

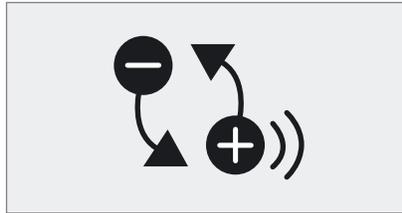

IONTOPHORESE ION+ IONTOPHORESE ION-

Das **ION+** Programm unterstützt die Tiefenreinigung der Haut und befreit sie von Belastungen. Es unterstützt die Vitalisierung der Haut.

Das **ION-** Programm unterstützt die Aufnahmefähigkeit der Haut. Es kann die hauteigenen Feuchtigkeitsversorgung und Nähr- und Wirkstoffzufuhr innerhalb der Haut unterstützen. Die Energie der Iontophorese kann die Neubildung von Kollagen und Elastin fördern. Fältchen und Linien können optisch geglättet und Konturen optisch gestrafft werden.

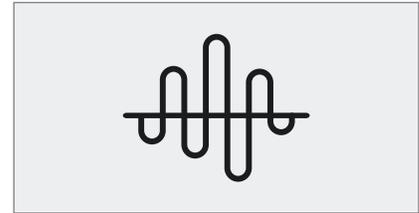

ELEKTRO-MUSKULÄRE- STIMULATION EMS

Im EMS Programm gibt das Gerät leichte und kaum spürbare elektrische Impulse an die Haut ab. Diese können die Mikromuskulatur in der Haut spürbar anregen und Hautzellen sanft stimulieren. Gesichtspartien können so optisch gestrafft und ein glattes und definiertes Erscheinungsbild gefördert werden.




LICHTTHERAPIE

Rotes LED Licht kann die Kollagenproduktion in der Haut anregen, das Bindegewebe stärken und ein optisch geglättetes und gestrafftes Erscheinungsbild unterstützen.


Blaues LED Licht kann die hauteiogene Reinigungsfunktion unterstützen und zu einem optisch reinen und strahlenden Teint beitragen.

Grünes LED Licht kann eine beruhigende Wirkung auf die Haut haben und Hyperpigmentierungen optisch positiv beeinflussen.

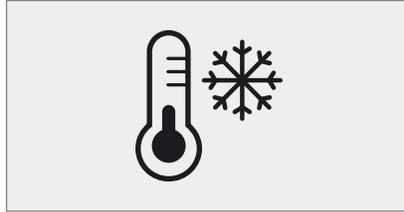

KÄLTETHERAPIE

Bei der Kältetherapie werden die Metallelektroden des Geräts auf 12° Celsius heruntergekühlt. Kälte kann sich bei leichten Schwellungen oder Tränensäcken positiv auf deren optisches Erscheinungsbild auswirken. Kälte kann adstringierend auf die Haut wirken und somit ein optisch verfeinertes Porenbild unterstützen.

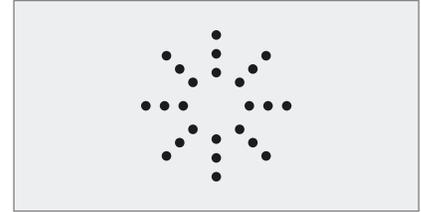

VIBRATIONS-MASSAGE

Das bei der Iontophorese zuschaltbare Vibrationsprogramm (VIB) kann die Mikrozirkulation und Funktionen in der Haut unterstützen. Die Vibration kann die Haut entspannen und zu einer optischen Verbesserung der Hautfestigkeit führen.



VERWENDUNG DES 6 IN 1 BEAUTY MAKERS



Um optisch sichtbare Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie den BEATE JOHNNEN 6 IN 1 BEAUTY MAKER über mindestens 10-12 Wochen zwei- bis dreimal in der Woche verwenden. Hierbei können Sie die einzelnen Programme nacheinander anwenden oder auch gezielt, je nach Hautbedürfnis, eines der Programme auswählen.

Vor dem Einschalten des Gerätes: Reinigen Sie Ihre Haut vor Anwendung des BEATE JOHNNEN 6 IN 1 BEAUTY MAKERS.

Inbetriebnahme des Gerätes: Drücken Sie die Taste An/Aus  für 3 Sekunden um das Gerät einzuschalten. Das Display leuchtet auf.

Wird das Gerät innerhalb von 3 Minuten nicht betätigt, schaltet es sich danach automatisch aus.



PROGRAMM RADIOFREQUENZ RF & WÄRMETHERAPIE



Nach dem Einschalten des Geräts erscheint im Display das Programm „RF“.

Das Programm Radiofrequenz kann während der anderen Programme durch drücken der Taste RF beliebig aktiviert oder deaktiviert werden.

Drücken Sie die Programmtaste, um das Programm zu starten.

Die Temperatur der Metallelektroden steigt kaum spürbar auf etwa 42°-45° Celsius. Beginnen Sie die Behandlung mit geringer Intensität und steigern Sie diese langsam je nach Hautbedürfnis.

Das Programm Radiofrequenz funktioniert nur in Kombination mit einem der nachfolgenden Programme. Lassen Sie hierzu die Radiofrequenz aktiviert und schalten mit der Taste Programmwechsel zum gewünschten Programm.



PROGRAMM IONTOPHORESE ION+



Das Programm kann nach der Reinigung oder gemeinsam mit einem Reinigungswasser angewendet werden. Benutzen Sie hierzu ein Kosmetiktuch mit dem Reinigungswasser und befestigen Sie das Tuch mit Hilfe des magnetischen Metallrings am BEATE JOHNEN 6 IN 1 BEAUTY MAKER.

Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste Programmwechsel, bis das Programm „ION+“ im Display erscheint.

Mit den Tasten +/- können Sie die Intensität von 1-5 einstellen.

Beginnen Sie die Behandlung mit geringer Intensität und steigern Sie diese langsam je nach Hautbedürfnis. Vibration kann optional dazu geschaltet werden.

Das Programm wird nach 3 Minuten automatisch gestoppt.



PROGRAMM IONTOPHORESE ION-



Für bestmögliche Ergebnisse sollte das Programm parallel zu einem Pflegeprodukt angewendet werden. Tragen Sie hierzu ein Serum, eine Ampullenkur oder sonstige Pflege dünn und gleichmäßig auf die Haut auf und lassen sie kurz einziehen.

Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste Programmwechsel, bis das Programm „ION-“ im Display erscheint.

Mit den Tasten +/- können Sie die Intensität von 1-5 einstellen.

Beginnen Sie die Behandlung mit geringer Intensität und steigern Sie diese langsam je nach Hautbedürfnis. Vibration kann optional dazu geschaltet werden.

Das Programm wird nach 3 Minuten automatisch gestoppt.



PROGRAMM ELEKTRO-MUSKULÄRE-STIMULATION EMS



Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste Programmwechsel, bis das Programm „EMS“ im Display erscheint.

Während des EMS Programms funktioniert das Programm Vibration nicht.



Mit den Tasten +/- können Sie die Intensität von 1-5 einstellen.

Beginnen Sie die Behandlung mit geringer Intensität und steigern Sie diese langsam je nach Hautbedürfnis.

Das Programm wird nach 3 Minuten automatisch gestoppt.



PROGRAMM LICHTTHERAPIE



Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste Programmwechsel, bis das Programm „LED“ im Display erscheint.

Mit den Tasten +/- können Sie zwischen rotem, grünem und blauem LED Licht wechseln. Die Beschreibung zu den einzelnen Farben finden Sie auf Seite 13.

Das Programm wird nach 3 Minuten automatisch gestoppt.



PROGRAMM KÄLTETHERAPIE



Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste Programmwechsel, bis das Programm „COOL“ im Display erscheint.

Das Programm wird nach 3 Minuten automatisch gestoppt.

Sie sollten dieses Programm maximal zweimal hintereinander verwenden, um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.

Während der Kältetherapie funktionieren die Programme Radiofrequenz und Vibration nicht.

REINIGUNG



Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch indem Sie den Kopf des Geräts mit einem weichen Baumwolltuch abwischen. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser.

ANWENDUNG IM GESICHT



Gesichtskontur: Setzen Sie das Gerät am Kinn an und bewegen Sie es auf und ab.




Hals: Das Gerät am Hals ansetzen und gleichmäßig auf und ab führen.



Stirn: Das Gerät an der Stirn ansetzen und von links nach rechts hin und her führen.

ANWENDUNG AM KÖRPER

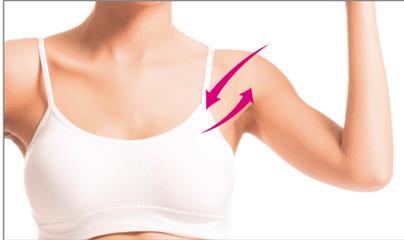

Achseln: Führen Sie das Gerät von der Schulter zur Achselhöhle in schwingenden Bewegungen auf und ab.



Arm: Starten Sie vom inneren Oberarm und führen Sie das Gerät weiter bis zum Ellenbogen vor und zurück.



Taille: Führen Sie das Gerät in schwingenden Bewegungen an der Taille auf und ab.



Bauch: Führen Sie das Gerät in schwingenden Bewegungen vom oberen Bauchbereich zum unteren Bauchbereich auf und ab.



Oberschenkel: Führen Sie das Gerät in gleichmäßigen Bewegungen an Ihrem Oberschenkel auf und ab.



Unterschenkel: Führen Sie das Gerät in kreisenden Bewegungen an Ihrem Unterschenkel auf und ab.



BEATE JOHNNEN
SKINLIKE

BEATE JOHNNEN GMBH COSMETICS
KELTENRING 14, D-82041 OBERHACHING
WWW.BEATEJOHNNEN.DE