



BEATE JOHNEN
SKINLIKE

BEATE JOHNEN FACE & BODY SCHRÖPFGERÄT

Handbuch





Liebe Skinlikerinnen und Skinliker,

das Beate Johnen Face & Body Schröpfgerät rundet das Programm der Homecare-Beauty-Geräte weiter ab. Es behandelt Ihre Haut nach dem Prinzip der langjährig bewährten Schröpfmethode, die bereits erfolgreich bei traditionellen Therapieverfahren angewandt wird. Das Beate Johnen Face & Body Schröpfgerät unterstützt ermüdetes Gewebe, sich durch das Ansaugen der Haut mittels Unterdruck und zeitgleicher Massage, zu regenerieren. Die Produktion von Collagen wird spürbar aktiviert und die Faltenbildung wird sichtbar reduziert. Ihre Hautelastizität wird merklich verbessert und sie erhalten eine optisch straffere Körpersilhouette.

Genießen Sie mit dem Beate Johnen Face & Body Schröpfgerät eine angenehme Massage und gönnen sich eine wohltuende Auszeit mit sichtbarem Erfolg.

Viel Freude bei der Anwendung
wünscht herzlichst Ihre

A handwritten signature in black ink, reading "Beate Johnen". The script is fluid and cursive, with the first name "Beate" and the last name "Johnen" clearly distinguishable.



BEATE JOHNNEN FACE & BODY SCHRÖPFGERÄT

Sicherheits- und Warnhinweise	6
Rücknahme und Entsorgung	7
Lieferumfang	8
Aufbau und Bedienelemente	9
Gerätefunktionen	10
Akku/Ladezeit	11
Laden des Gerätes	12
Anwendungshinweise	13
Hautpflege durch Lichttherapie	14
Inbetriebnahme des Gerätes	15-19

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den kosmetischen Heimgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Wenn Sie etwas Ungewöhnliches am Gerät, seiner Funktion oder an der Haut feststellen, stoppen Sie die Anwendung und schalten das Gerät aus.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät und verbinden Sie es ordnungsgemäß mit der Haushaltssteckdose, um Fehlfunktionen oder Überhitzung zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie vor Gebrauch die Intaktheit des Geräts sicher. Sollten Sie einen Defekt am Gerät oder Ladegerät feststellen können, verwenden Sie es nicht, um Stromschläge, Kurzschlüsse o.Ä. zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Ladegerät ausschließlich im Spannungsbereich von 100-240V.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer und hohen Temperaturen aus.
- Erkennen Sie irgendeinen Defekt am Gerät oder eine fehlerhafte Funktion, so wenden Sie sich umgehend an den Hersteller.
- Die enthaltene und fest verbaute Batterie des Geräts kann sich bei unsachgemäßem Gebrauch stark erwärmen oder verformen. Verwenden Sie das Gerät nicht, sollte es sich plötzlich stark erhitzen oder verformen.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht in Zusammenhang mit Wasser, um Stromschläge, Kurzschlüsse o.Ä. zu vermeiden
- Öffnen Sie das Gerät nicht, dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Vermeiden Sie das Herunterfallen des Geräts, dies kann zu Beeinträchtigung der Funktionen führen.
- Bitte laden Sie das Gerät alle drei Monate einmal auf, wenn Sie es länger nicht benutzen.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Symbole und Zeichen



Achtung! Gebrauchsanweisung und weitere Begleitdokumente beachten.



CE-Zertifizierung



Seriennummer



Von Kindern
fernhalten

Nutzung ausschließlich in trockenem und staubfreiem Umfeld.

RÜCKNAHME UND ENTSORGUNG



Durch das Mülltonnensymbol werden schadstoffhaltige Batterien gekennzeichnet sowie der Umstand, dass Batterien nicht über den Hausmüll, sondern fachgerecht entsorgt werden müssen.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten, die Batterien (Akkumulatoren) enthalten, weisen wir Sie gemäß §18 Abs. 1 des Batteriegesetzes (BattG) auf Folgendes hin:

Altgeräte/Batterien dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Da sich in Ihrem Gerät ein Akkumulator befindet, entsorgen Sie bitte das gesamte Gerät fachgerecht. Bitte öffnen Sie das Gerät nicht. Auch der Hersteller ist zur Rücknahme des Gerätes verpflichtet.

LIEFERUMFANG

Ihr Beate Johnen Face & Body Schröpfgerät umfasst folgenden Lieferumfang:

1. Handbuch
2. Netzadapter inkl. USB-Ladekabel
3. Saugaufsatz für das Gesicht
4. Saugaufsatz für den Körper
5. Schröpfgerät



AUFBAU UND BEDIENELEMENTE



Notentriegelungsknopf



USB-Microanschluss für Ladegerät

Technische Daten

Name: Beate Johnen
Face & Body Schröpfgerät
Model: BZ-0709
Leistung: 5W
Eingangsspannung:
DC5V 1A

Batterieladezeit: 3 Std.
Akkulaufzeit: bis zu 2 Std.
Größe (L x B x H):
20,3 x 5,3 x 5,5 cm
Gewicht: 215 g
Akku: Lithium Battery,
3.7 V, 900 mA

GERÄTEFUNKTIONEN



Statusanzeige

- Anzeige des Akku-Ladezustands
- Anzeige der LED-Lichteinstellung
- Anzeige der Ansaugzeit
- Anzeige der Pausenzeit
- Anzeige der Saugstärke

Ein- und Ausschaltknopf

EIN: Den Knopf solange gedrückt halten bis ein Signalton ertönt und das Display aufleuchtet.

AUS: Den Knopf solange gedrückt halten bis erneut ein Signalton ertönt und sich das Gerät abschaltet.

Auswahlmodus

Die verschiedenen Modi können durch einmaliges Drücken der MODE-Taste ausgewählt werden.

Pfeiltasten

Die Intensität der einzelnen Modi können durch Drücken der Pfeiltasten ausgewählt werden.


AKKU/LADEZEIT



Ladekabel



Anschluss des Ladegeräts

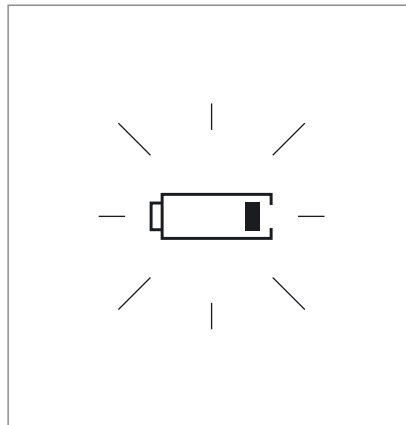

Anzeige des Akku-Ladezustands

Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Anwendung vollständig auf.

Schließen Sie das USB-Kabel an Ihr Gerät an und verbinden Sie es mit dem Netzadapter. Während des Ladens leuchtet durchgängig das Display und zeigt den Ladestatus solange an, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Vollständig aufgeladen können Sie das Gerät bis zu 2 Stunden nutzen.

Die Einhaltung der Ladevorgänge verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Die Batterieanzeige zeigt Ihnen den derzeitigen Ladestatus an. Sobald das Symbol zu blinken anfängt, laden Sie das Gerät bitte auf.

LADEN DES GERÄTES



Vor Inbetriebnahme des Gerätes muss dies vollständig aufgeladen werden. Schließen Sie hierzu das mitgelieferte USB-Ladekabel an Ihr Gerät und einen Stromnetzadapter an. Stecken Sie dann den Adapter in die Steckdose.

Sobald das Gerät lädt, leuchtet das Display auf und der Ladezustand sowie das LED-Symbol werden angezeigt.

Während des Ladevorgangs ist das Ausschalten des Gerätes nicht möglich. Der Ladevorgang ist erst abgeschlossen, wenn das Display erlischt. Warten Sie bitte eine Minute nach Abschluss des Ladevorgangs bis Sie das Gerät nutzen. Sollte sich das Gerät automatisch abstellen, erzeugt es einen Piepton.

ANWENDUNGSHINWEISE

1. Das Erhöhen der Saugkraft bedeutet keine zwingende Verbesserung der Wirkung. Exzessive Stimulation kann die Haut reizen und röten. Entscheiden Sie sich daher für eine angemessene Einstellung.
2. Bei anfänglicher Behandlung kann es stellenweisen zu Rötungen kommen, die schnell wieder abklingen sollten. Tritt keine Besserung ein, setzen Sie die Behandlung ab.
3. Bei Vorerkrankungen jeglicher Art bitte vor Gebrauch des Geräts einen Arzt konsultieren.
4. Nutzen Sie das Produkt bitte nicht auf folgenden Stellen:
 - Schulterblätter, Herz, Hals, Nacken
 - Metall-, Plastik, Silikon- oder andere Implantate
 - Wirbelsäule
5. Sollten Sie die Silikongummiringe bei der Reinigung vom Saugaufsatz entfernen, sollten Sie zwingend darauf achten, diese vor der nächsten Anwendung wieder anzubringen, da ansonsten keine effektive Ansaugung erfolgen kann.
6. Wenn Sie das Gerät länger als zwei Monate nicht benutzen, lassen Sie es vor dem Einschalten voll aufladen.

HAUTPFLEGE DURCH LICHTTHERAPIE



Die Hautpflege lässt sich über das LED-Licht durch Bedienen der Pfeiltasten in drei verschiedene Farben einstellen:

Rotes Licht (625 nm)

Das rote Licht unterstützt das Anti-Aging und die Hautstraffung, indem es die Bindegewebszellen spürbar stimuliert und die Kollagen- und Elastinproduktion anregen kann.

Grünes Licht (525 nm)

Das grüne Licht verbessert die Ebenmäßigkeit der Haut und kann dazu beitragen, Poren und die Hautstruktur zu verfeinern.

Blaues Licht (415 nm)

Das blaue Licht unterstützt das Hautgleichgewicht und macht die Haut glatt und geschmeidig. Es kann Unreinheiten vorbeugen und die Haut sichtbar von Belastungen befreien.

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES



1. Aufsatz anbringen: Wählen Sie den passenden Aufsatz für die Körper- oder Gesichtsanwendung aus. Setzen Sie diesen in das Gerät ein und drehen Sie ihn um 45° im Uhrzeigersinn fest.



2. Einschalten des Geräts: Drücken Sie solange „START“ bis ein Signalton ertönt und das Display aufleuchtet. Das Gerät fängt bei der kleinsten Stufe an! 5 Sekunden Anlaufzeit, 3 Sekunden Pause.



3. LED Hautpflege-Einstellungen: Die Lichttherapie lässt sich in drei verschiedene Farben einstellen (siehe Seite 10). Sobald nach dem Einschalten auf dem Display „LED“ aufblinkt, können Sie mit den Pfeiltasten zusätzlich eine der Farben auswählen.

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES



4. Ansaugzeit einstellen: Drücken Sie die Taste „MODE“ erneut und wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten die Ansaugzeit (bis 10 Sekunden), je nach Bedarf.

Empfehlung: Beginnen Sie mit einer geringen Ansaugzeit und tasten sich langsam vor. Wählen Sie für sensible Hautbereiche eine geringe Ansaugzeit.



5. Pausenzeit einstellen: Drücken Sie erneut die Taste „MODE“ und stellen Sie mit den Pfeiltasten eine Zeit ein, für die das Ansaugen pausiert wird, bis sich das Ansaugen automatisch wiederholt. Entscheiden Sie sich zwischen 1-10 Sekunden, je nach Bedarf.

Empfehlung: Wählen Sie für sensible Hautbereiche eine längere Pausenzeit.




6. Saugstärke einstellen: Drücken Sie erneut die Taste „MODE“ um die Saugstärke einzustellen. Die Einstellung ist in 5 verschiedene Stufen möglich. Sobald die Stufen auf dem Display angezeigt werden, kann die Auswahl mithilfe der Pfeiltasten erfolgen.

Empfehlung: Wählen Sie zu Beginn eine geringe Stufe und steigern Sie sich bei Bedarf langsam.



INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

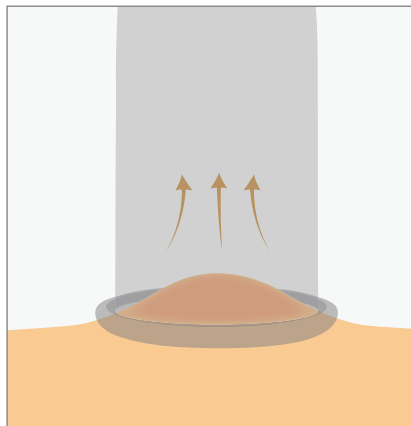

7. Anwendung: Setzen Sie den Saugaufsatz auf die Haut auf und starten Sie das Programm, indem Sie erneut „MODE“ drücken. Halten Sie die Saugglocke während der Ansaugzeit auf die zu behandelnde Stelle. Je nach Einstellung der Ansaug- und Pausenzeit agiert das Gerät automatisch. Beginnen Sie mit der kleinst möglichen Stufe pro Hautpartie und steigern Sie die Anwen-

dungsdauer und -stärke nach Bedarf. Setzen Sie das Gerät nach dem Saugvorgang auf das benachbarte Hautareal und fahren Sie so fort, bis der gewünschte Hautbereich behandelt wurde.

Notentriegelungsknopf: Sollte die Saugstärke zu stark sein, können Sie die Saugung über den Notentriegelungsknopf stoppen.

8. Ausschalten des Gerätes: Halten Sie „START“ solange gedrückt bis ein Signalton ertönt. So wird der Vorgang beendet und das Schröpfgerät ausgeschaltet. Das Gerät startet dann wieder in der zuvor eingestellten Stufe.



9. Reinigung des Gerätes: Entfernen Sie den Saugaufsatz vom Gerät. Reinigen Sie unmittelbar nach der Anwendung den Saugaufsatz mit einem feuchten Tuch und einer milden Reinigungslösung. Das Schröpfgerät selber sollte nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.





BEATE JOHNNEN
SKINLIKE

BEATE JOHNNEN GMBH COSMETICS
KELTENRING 14, D-82041 OBERHACHING
WWW.BEATEJOHNNEN.DE