


PL EN DE FR ES PT IT CZ SK SL EE LT LV
NB FI HU RO AR RU EL HR SV DA NL TR BG

BEAUTIFLY

LaserBoost

PRO

series

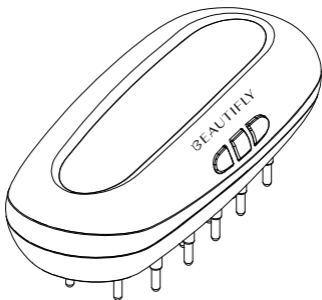

Multifunctional hair growth comb User manual

 /beautifully.global  /beautifully_global

 /@beautifully.global  /@beautifully.global


f1

[facebook.com/beautify.global](https://www.facebook.com/beautify.global)


[youtube.com/@beautify.global](https://www.youtube.com/@beautify.global)



f2

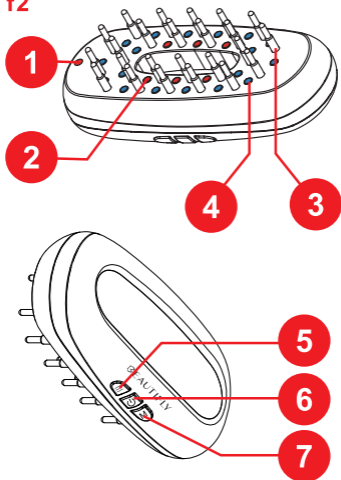

f2

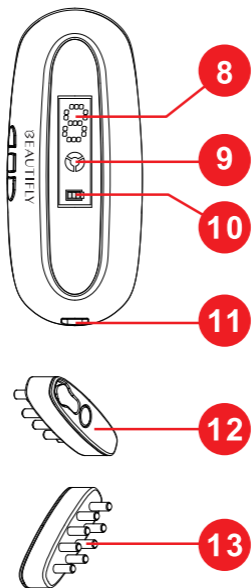

Ladetyp: USB-C
 Versorgungsspannung: 3,7 V
 Ausgangsleistung: 3,33 W
 Akkukapazität: 700 mAh/3,7 Wh
 Ladezeit: 2-3 Stunden
 Betriebszeit im Einzelmodus: 10 Minuten
 Standby-Zeit: 90 Tage (wenn das Gerät länger als 90 Tage nicht verwendet wurde, laden Sie es vor der Verwendung vollständig auf)
 Abmessungen (B x L x H): ~136,7×58,2×44,5 mm
 LED-Licht: 18 Gruppen
 Anzahl der Laser (LLLT): 6
 Infrarotlichtwellenlänge: 850±10 nm
 Rotlichtwellenlänge: 620±10 nm
 Blaulichtwellenlänge: 465±10 nm
 Laserlichtwellenlänge: 650±10 nm
 Material: ABS + Metall
 Enthält: Gerät x1, USB-Kabel x1, Bedienungsanleitung x1, Pipette x1, Garantiekarte x1

Tasten und Anzeigen: [siehe Seite 2-3, f2]

1. Negativ-Ionen-Emissionsbereich
2. Laserlicht
3. EMS-Kammzähne
4. LED-Licht
5. Vibrationsknopf
6. Ein-/Ausschalter (Stufenanpassungstaste)
7. Modustaste
8. Zeitindikator
9. Stufenindikator
10. Batterieanzeige
11. USB-Ladeanschluss
12. Flüssigkeitstank (4 ml)
13. Flüssigkeitsverteilungszähne

Verwendung:

- Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um in den ersten Stufen des Rotlichtmodus zu gelangen, und drücken Sie dann kurz, um die Stufen zu wechseln.
- Drücken Sie die Modustaste, um in den Blaulichtmodus zu wechseln, und drücken Sie dann kurz die Ein-/Austaste, um die Stufe anzupassen.
- Drücken Sie die Vibrationsknopf, um die Vibration einzuschalten, und drücken Sie erneut, um sie auszuschalten.
- Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Hinzufügen von Haarpflegeserum:

- Entfernen Sie den Tank aus dem Gerät und heben Sie die Abdeckung an.
- Verwenden Sie die Pipette, um Öl oder Serum in den Tank zu geben.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und setzen Sie den Tank zurück in das Gerät.

Laden:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist. Wenn der Akku leer ist, laden Sie das Gerät mindestens 15-25 Minuten auf, um eine Behandlung durchzuführen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und den Adapter an (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten), und stecken Sie dann den Adapter in die Steckdose (das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Beim Laden bewegt sich die Batterieanzeige).
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die Batterieanzeige auf sich zu bewegen.
- Wenn der Akku schwach ist, blinkt die Batterieanzeige dreimal und das Gerät schaltet sich aus.

Warnungen:

1. Lesen Sie vor der Verwendung des gekauften Produkts die Bedienungsanleitung des Produkts und diese Sicherheitswarnungen, Wartungs- und Lagerungsanweisungen sowie Anweisungen zum Umgang mit gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten. Befolgen Sie die Empfehlungen und verwenden Sie das Produkt wie vorgesehen.
2. Das Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Nur Erwachsene sollten das Produkt verwenden.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht funktioniert, falsch funktioniert oder auf irgendeine Weise fallen gelassen oder beschädigt wurde. Öffnen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Wenn das Produkt noch unter Garantie steht, kontaktieren Sie den Verkäufer oder Garantiegeber. Wenn die Garantiezeit abgelaufen ist oder der Defekt nicht auf das Produkt zurückzuführen ist, lassen Sie es in einem geeigneten Servicezentrum reparieren.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, Wasser oder Feuchtigkeit und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
5. Das Produkt ist für die Verwendung bei Raumtemperatur bestimmt, im Bereich von 10 bis 40 Grad Celsius.
6. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.
7. Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur im Bereich von 10 bis 40 Grad auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
8. Bei Verschmutzung das Produkt von der Stromquelle trennen, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen, bevor es gelagert wird. Verwenden Sie keine scheuernden oder korrosiven Reinigungsmittel, da sie das Produkt beschädigen können.
9. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein beschädigtes Netzkabel oder einen Stecker bemerken, es einen unangenehmen Geruch (z. B. verbrannt) abgibt, überhitzt oder Rauch freisetzt. In solch einem Fall das Produkt nicht selbst öffnen oder reparieren. Wenn das Produkt noch unter Garantie steht, kontaktieren Sie den Verkäufer oder Garantiegeber. Wenn die Garantiezeit abgelaufen ist oder der Defekt nicht auf das Produkt zurückzuführen ist, lassen Sie es in einem geeigneten Servicezentrum reparieren.
10. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist.

11. Die Stromquelle muss mit der erforderlichen Produktspannung übereinstimmen.

12. Nach Gebrauch das Produkt von der Stromquelle trennen und vor dem Bewegen oder Lagern abkühlen lassen.

13. Wickeln oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht, da dies zu Schäden führen kann.

14. Zubehör, das nicht vom Hersteller stammt, kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt wird.

15. Verwenden Sie das Gerät mit Augenschutz (Schutzbrille). Richten Sie das vom Gerät ausgestrahlte Licht nicht auf die Augen.

16. Das Gerät ist nicht für die Verwendung bei Kindern bestimmt.

17. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.

18. Das Gerät sollte nicht von Personen verwendet werden, die in der Vergangenheit oder derzeit:

- Hautkrebs;
- zahlreiche Muttermale oder andere Hautveränderungen;
- Kollagen- oder Gefäßerkrankungen der Haut, z. B. Keloidnarben, Wundheilungsprobleme, Krampfadern oder Gefäßektasie;
- Hautempfindlichkeit gegenüber Licht;
- Hautausschlag oder allergische Reaktionen auf der Haut, an der die Behandlung angewendet werden soll;
- Infektionen, Ekzeme, Verbrennungen, Follikulitis, offene Schnitte, Abschürfungen, Herpes, Wunden oder Verletzungen oder Blutergüsse an der Stelle, an der die Behandlung angewendet werden soll;
- chirurgische Eingriffe an der Stelle, an der die Behandlung angewendet werden soll;
- Epilepsie mit Empfindlichkeit gegenüber Blitzlicht;
- Diabetes, Lupus, Porphyrie oder Herzinsuffizienz;
- Blutgerinnungsstörungen;
- Immunerkrankungen (einschließlich HIV- oder AIDS-Infektion).

19. Verwenden Sie das Gerät nicht an folgenden Stellen:

- im Gesicht, insbesondere um die Augen und in der Nähe der Augenbrauen;
- an Brustwarzen und Areolas, Schamlippen, Hodensack oder um die Vagina oder den Anus;
- in den Nasenlöchern und Ohren;
- auf oder in der Nähe von Bereichen, die künstliche Objekte enthalten, wie Silikonimplantate, Herzschrittmacher, subkutane Injektionsstellen (Insulinspender) oder Piercings;
- auf Muttermalen, Sommersprossen, dunkleren Hautbereichen, Narben;
- auf Warzen, Tätowierungen und Stellen mit permanentem Make-up;
- wo langanhaltende Deodorants verwendet werden;
- in sonnenverbrannten Bereichen, kürzlich gebräunten Bereichen (innerhalb der letzten 48 Stunden) und Bereichen, in denen Selbstbräuner verwendet werden.

20. Nach der Behandlung für mindestens 48 Stunden die Haut nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Weitere Informationen finden Sie > siehe Seite 2, f1