

BEAUTIFLY

Scrub Slim

PRO
series

Peeling
kawitacyjny
Multifunctional
skin scrubber

Instrukcja obsługi
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu



@beautifly.eu

f1

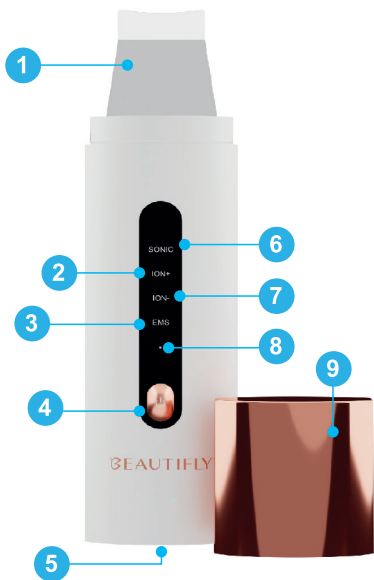

f2



Produktabmessung:	170*44*20mm
Nettogewicht:	~122g
Lithium Batterie:	3,7 V 700 mAh
Eingangsleistung:	5W
Ladespannung:	5V 1000mA
Arbeitstemperatur:	+50C~+40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	≤80 %

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Teilebeschreibung [Seite 2 - f1]:

1. Edelstahlspatel
2. ION+-Anzeige
3. EMS-Anzeige
4. Ein/Aus-Taste
5. Ladeanschluss
6. SONIC-Anzeige
7. ION-Anzeige
8. Ladeanzeige
9. Stecker

Funktionen:

Multifunktionales Kavitationspeeling Scrub Slim Pro zur Hautpflege. Es kombiniert **Ultraschall-** und **Positionentechnologie**, um abgestorbene, verhornte Epidermis zu zerstäuben und zu reinigen. Die Kombination aus **Ultraschall** und negativen Ionen fördert die Aufnahme der enthaltenen Essenz in gebrauchten Cremes, Ampullen oder Seren. **Ultraschall** und EMS stimulieren die Produktion von **Kollagen** und **Elastin**, die für die Hautstraffung verantwortlich sind. 1-2 mal pro Woche anwenden, um die Haut gründlich zu reinigen und die Wirksamkeit der täglichen Pflege zu verbessern.

Ultraschallreinigung (SONIC): Nach der Befeuchtung der Haut mit Wasser zerstäuben hochfrequente **Ultraschall**schwingungen das Wasser und erweichen abgestorbene Hautzellen vollständig.

Reinigung (SONIC & ION+): Nach der **Ultraschall**reinigung im **SONIC**-Modus sollte die Haut noch feucht sein. Positive Ionen tragen dazu bei, Unreinheiten tief in die Poren der Haut zu transportieren.

Feuchtigkeitsspendend (SONIC & ION-): Attraktive Anionen nutzen die Mikroelastizität der menschlichen Haut und importieren mithilfe der **Peelingklinge** Nährstoffe effektiv oberflächlich in die Basalschicht der Haut, sodass diese genährt und mit Feuchtigkeit versorgt wird.

Verjüngung (SONIC + EMS): Durch **Ultraschall** und EMS erzeugte Mikroströme stimulieren die Zellaktivität. Dieser Prozess regt die Haut an, **Kollagen** und **Elastin** zu produzieren. Dadurch wird die Haut straff und glatt.

Beschreibung der Modi:

1. Reinigung: Schalten Sie das **SONIC**-Gerät ein, die **Peelingklinge** vibriert mit hoher Frequenz
2. Reinigung: Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie 2 Mal die Ein-/Aus-/Modus-Taste am **ION+**, die **Peelingklinge** vibriert mit hoher Frequenz
3. Reinigung: Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste am **ION-3-mal**, das **Peeling-Pad** vibriert mit hoher Frequenz
4. Verjüngung: Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie im **EMS**-Modus 4 Mal die Ein-/Aus-/Modus-Taste, der **Peelingkopf** vibriert in hoher Frequenz
5. Automatische Abschaltung: 2 Pieptöne, Licht aus, Gerät aus.
6. Manuelles Herunterfahren: Drücken Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste, um das Gerät auszuschalten.
7. Batterie schwach: 3 Pieptöne, die Taste wird rot und blinkt.
8. Laden des Geräts: Die Ein-/Aus-/Modus-Taste wird rot und blinkt.
9. Laden Sie das Gerät auf: Die Ein-/Aus-/Modus-Taste wird grün.

Wie benutzt man:**Reinigung der Epidermis (Ultraschall)**

1. Reinigen Sie Ihre Haut vor Beginn der Behandlung gründlich und entfernen Sie Make-up. Anschließend befeuchten Sie Ihre Gesichtshaut mit einem Wattepad oder Zerstäuber. Hierzu können Sie physiologische Kochsalzlösung, Tonic, Wasser oder Hydrolat verwenden. Während der Behandlung muss die Haut stets feucht bleiben. Bei trockener Haut kann die Behandlung nicht durchgeführt werden.

2. Schalten Sie das Gerät ein und aktivieren Sie den SONIC-Modus.

3. Bewegen Sie den Spatel vorsichtig der Länge nach von unten nach oben Gesichtskonturen im 45-Grad-Winkel. Wiederholen Sie die Aktion mehrmals gründlich im gesamten Gesicht.

Reinigung der Epidermis durch Ionisierung (Ultraschall + Ionisation +)

1. Denken Sie vor Beginn der Behandlung daran, die Haut stets feucht zu halten. Hierzu können Sie physiologische Kochsalzlösung, Tonic, Wasser oder Hydrolat verwenden. Bei trockener Haut kann die Behandlung nicht durchgeführt werden.

2. Schalten Sie das Gerät ein und aktivieren Sie den ION+-Modus.

3. Bewegen Sie den Spatel vorsichtig der Länge nach von unten nach oben Gesichtskonturen im 45-Grad-Winkel. Wiederholen Sie die Aktion mehrmals gründlich im gesamten Gesicht.

4. Wischen Sie Ihr Gesicht mit Tonic ab.

Einführung von Nährstoffen mit

Ultraschall (Ultraschall + Ionisation-)

1. Tragen Sie nach der Reinigung Ihrer Gesichtshaut ein Pflegeprodukt (Creme, Serum, Ampulle, Gel) auf.

2. Schalten Sie das Gerät ein und aktivieren Sie den ION-Modus.

3. Bewegen Sie den Spatel vorsichtig von unten nach oben entlang der Gesichtskonturen. Der Spatel sollte umgekehrt angeordnet sein wie im ersten Schritt. Wiederholen Sie die Aktion mehrmals gründlich im gesamten Gesicht.

EMS (Ultraschall + EMS-Ströme)

1. Schalten Sie nach der Pflege Ihrer Gesichtshaut das Gerät ein und aktivieren Sie den EMS-Modus.

2. Um die Hautelastizität zu verbessern, führen Sie den Spatel im 45-Grad-Winkel von unten nach oben entlang der Gesichtskonturen. Wiederholen Sie die Aktion mehrmals gründlich im gesamten Gesicht.

3. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Betrieb automatisch aus.

4. Wischen Sie das Gerät nach der Verwendung mit einem feuchten Baumwolltuch ab.

Warnungen:

1. Eine Person mit einem Herzschrittmacher kann den Eingriff nicht mit dem Scrub Slim Pro-Gerät durchführen.

2. Die Verwendung durch Personen nach einer Hautoperation innerhalb eines Monats oder nach Hautverbrennungen ist verboten.

3. Die Verwendung durch Personen mit Entzündungen ist verboten Haut, Narben, Schäden und elektromagnetische Empfindlichkeit.

4. Legen Sie vor Arbeitsbeginn Ihre Uhr, Brille und andere Metallgegenstände ab.

5. Vermeiden Sie den Kontakt des Kopfes mit dem Augapfel.

6. Arbeiten Sie nicht für längere Zeit am selben Ort.

7. Benutzen Sie das Gerät nicht von schwangeren Frauen.

Reinigung:

Spülen Sie den Peelingspatel ab und wischen Sie ihn mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in Wasser.

Lagerung:

1. Halten Sie das Gerät trocken und sauber.

2. Von hohen Temperaturen fernhalten.

3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu