

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERBLICK ÜBER DIE VORTEILE

Bring on the Glow 44

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Produktwarnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 45

ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang 49

Bevor du beginnst 51

Hautanalyse 52

Funktionsweise der Bedienelemente 53

Optimale Anpassung 54

Was ist in meinem Behälter? 56

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung 57

Aufladen und Aufbewahrung 58

HAUTPFLEGEPRODUKTE

Hautpflege 59

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG UND HÄUFIGE FRAGEN ZUM GERÄT

Herstellergarantie 61

Zur Fehlerdiagnose und -behebung und für häufig gestellte Fragen den QR-Code scannen, um die vollständige Bedienungsanleitung aufzurufen.



Weitere Informationen findest du auf sharkclean.de.
ZUBEHÖR UND FARBEN KÖNNEN JE NACH MODELL VARIIEREN

BRING ON THE GLOW

PROFESSIONELLE ERGEBNISSE EINER KOMPLETTEN
GESICHTSBEHANDLUNG IN NUR 9 MINUTEN

VORTEILE DER PEELING-ANWENDUNG



VERBESSERTER GLOW

Strahlende Leuchtkraft von innen heraus.



VERSTÄRKTES PEELING

Kombiniert AHA/BHA-Formeln und physisches Peeling für eine hellere, strahlendere Haut.



KRAFTVOLLE ENTGIFTUNG

Gereinigte, weniger sichtbare Poren.



ERHÖHTE FEUCHTIGKEITSVERSORGUNG

Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit für ein glatteres Hautgefühl.



VORTEILE VON DEPUFFI



VERBESSERTE ABSCHWELLUNG

Verringert das Erscheinungsbild von dunklen Augenringen. Die Augenpartie sieht erfrischt und sichtbar weniger geschwollen aus.

KONTURIERTES ERSCHEINUNGSBILD

Sichtbar definierte Wangenknochen und Kieferlinie.

SCHNELLE BERUHINGUNG

Kühlende Linderung für eine sofort entspanntere, glattere Haut.



AKTIVIERTE AUSSTRAHLUNG

Die Massage fördert die Durchblutung für einen gesunden, strahlenden Look.

VORBEREITUNG DER HAUT

Bereitet die Haut auf das Peeling vor, indem Oberflächenunreinheiten gelöst werden.

LÖST SPANNUNGEN IM GESICHT

Hilft, die Muskeln zu entspannen.

PRODUKTWARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Verwende FacialPro Glow zu deiner Sicherheit nicht, wenn du eines der folgenden Produkte oder Routinen verwendet hast, beziehungsweise wenn du:

- zu Hause in den letzten 24 Stunden Peeling-Produkte verwendet hast, darunter Produkte, die AHAs oder BHAs enthalten.
- dich innerhalb der letzten 5 Stunden vor der Anwendung von FacialPro Glow rasiert hast.
- in der letzten Woche eine professionelle Gesichtsbehandlung mit Peeling erhalten hast.
- eine kosmetische Behandlung erhalten hast, bei der die Haut noch nicht vollständig geheilt ist, einschließlich Mikronadeln, Laser oder chemischem Peeling.
- vor Kurzem mit kosmetischen Injektionsprodukten wie Neurotoxinen oder Dermalfillern behandelt wurdest. Wende dich in diesem Fall bitte vor der Verwendung an deine Ärztin oder deinen Arzt.

Bitte verwende FacialPro Glow zu deiner Sicherheit nicht, wenn du die folgenden Medikamente einnimmst:

- Wenn du Isotretinoin einnimmst, allgemein als „Accutane“ bekannt.
- Verwende dieses Gerät nicht, wenn deine Haut akut von einem topischen Retinoid (z. B. Tretinoin, Adapalen) gereizt ist

ODER wenn du allergisch bist gegen:

- Weidenrinde, Aspirin oder andere Inhaltsstoffe in den topischen Produkten. Bitte lies vor der Verwendung die jeweilige Liste der Inhaltsstoffe auf der Verpackung

ODER wenn du unter einer der folgenden gesundheitlichen Einschränkungen leidest:

- Starke entzündliche Akne
- Empfindlichkeit oder Allergie gegen Kunststoff

Verwende FacialPro Glow zu deiner Sicherheit nicht, wenn bei dir eine der folgenden Beschwerden im Gesicht, am Haaransatz, an den Ohren oder am Hals vorliegt:

- Kürzlich erfolgte Gesichtschirurgie (bis du von deiner Ärztin oder deinem Arzt die Freigabe erhalten hast)
- Verdächtige Läsionen, Hautkrebs oder Tumore
- Ekzem
- Schuppenflechte
- Rissige Haut, Hautausschlag oder Blasen
- Entzündungen des Gewebes
- Hautinfektion, Fieberbläschen oder Warzen
- Sonnenbrand: Verwende die InstaHeat-Funktion auf DePuffi nicht bei Sonnenbrand
- Wenn du zu Blutergüssen neigst
- Bei Melasma oder Hyperpigmentierung, insbesondere, wenn sich diese durch leichte Wärme verschlimmert
- Bei Auftreten von unerwünschten Reaktionen die Anwendung abbrechen
- Bei Auftreten einer allergischen Reaktion die Anwendung abbrechen

PRODUKTWARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Konsultiere eine Ärztin oder einen Arzt, bevor du FacialPro Glow verwendest

- Wenn du Blutergüsse im Gesicht hast
- Wenn deine Haut mit Hautempfindlichkeit oder -reizung auf topische Hautpflegeprodukte reagiert
- Wenn du schwanger bist, stillst oder schwanger sein könntest (lass dich vor der Anwendung ärztlich beraten)
- Wenn du unter Kälte- oder Hitzeüberempfindlichkeit leidest
- Bei ungewöhnlichen Empfindungen (z. B. Taubheit)
- Wenn Derm Detox Peeling-Gel oder Hydro Infuse Hydrator in die Augen gelangt, sofort mit kaltem Wasser abspülen und ärztliche Hilfe aufsuchen

Warnhinweis zu Sonnenbrand

- Dieses Produkt enthält eine Alpha-Hydroxysäure (AHA), welche die Sonnenempfindlichkeit deiner Haut und insbesondere die Möglichkeit eines Sonnenbrands erhöhen kann. Verwende Sonnenschutzmittel, trage Schutzkleidung und begrenze die Sonnenexposition während der Verwendung dieses Produkts und für eine Woche danach

Sicher verwenden.

- Lies die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen zu dem Gerät und zur Hautpflege sorgfältig durch, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Modifiziere, deaktiviere oder umgehe keine Sicherheitsvorrichtungen oder Schutzfunktionen. Dies kann Stromschläge, Brände oder schwere Verletzungen verursachen; es führt zum Erlöschen der Garantie und verstößt gegen geltende Sicherheitsvorschriften.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es im Freien liegengelassen wurde.
- Bei Flugreisen sollte das Gerät im Handgepäck mitgeführt und nicht eingeklinkt werden. Das Gerät muss vollständig ausgeschaltet sein.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden. Verwende das Gerät nur unter den folgenden Umgebungsbedingungen:
 - Temperatur: zwischen 10 °C und 30 °C.
 - Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 15 % und 90 %, nicht kondensierend, jedoch ohne einen Wasserdampfpartialdruck von mehr als 50 hPa.
 - Ein atmosphärischer Druckbereich von 700 hPa bis 1060 hPa.
- Bei der Verwendung des Geräts und der Hautpflegeroutine kann es zu Trockenheit, Reizungen oder Rötungen der Haut kommen. Wenn Trockenheit auftritt, verwende eine Feuchtigkeitscreme für das Gesicht.
- Um eine sichere und wirksame Anwendung zu gewährleisten, das Gerät nicht über längere Zeiträume hinweg betreiben oder wiederholte Behandlungen durchführen, die über die dem Gerät beiliegende Anleitung hinausgehen. Eine übermäßige Verwendung kann zu Hautreizungen oder -schäden führen. Befolge stets die empfohlenen Nutzungsrichtlinien.
- Zur Vermeidung von Blutergüssen den Extraktions-Aufsatz auf der Haut nicht an derselben Stelle halten. Das Gerät muss sich ständig auf der Haut bewegen.
- Um das Risiko von Feuer, thermischen und chemischen Verbrennungen, Stromschlägen, schweren Verletzungen oder Todesfällen zu verringern, befolge die Vorsichtsmaßnahmen in diesem Abschnitt und die Verfahren in dieser Bedienungsanleitung. Der Power Hub enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Ist dieser beschädigt, kann er überhitzen, Feuer fangen oder eine Chemikalie abgeben, die Haut und Augen verbrennen kann.
- Nicht auf den Augen oder im Genitalbereich verwenden.
- Ziehe das USB-C-Kabel vorsichtig ab, wenn das Produkt vollständig aufgeladen wurde.

PRODUKTWARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Beaufsichtigung und vorgesehene Benutzer

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten vorgesehen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Bitte beachte vor der Anwendung die Gegenanzeigen.
- Nicht verwenden, wenn eine der Bedingungen in „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ (Seite 3) auf dich zutrifft
- Lass das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um das Risiko eines Verwickelns und einer möglichen Strangulation zu verringern.
- Kleinteile können von Kindern eingeatmet oder verschluckt werden. Wenn Kleinteile abbrechen oder sich vom Produkt lösen, sicher entsorgen.
- Dieses Gerät sollte nur von einer einzelnen Person verwendet werden. Diese Person ist der vorgesehene Bediener des Geräts.
- Reinige dein Gesicht mit Seife und Wasser, bevor du das Gerät verwendest.
- Achte beim Aufsetzen des Peeling- oder DePuffi-Aufsatzes auf einen sichereren Sitz auf dem Power Hub. Beim Aufsetzen auf den Power Hub sollte ein Klickgeräusch zu hören sein. Wende beim Aufsetzen des Peeling- oder DePuffi-Aufsatzes keine Gewalt an.
- Wende beim Aufsetzen der Spitzen keine Gewalt an.

Vor Nässe schützen

- Tauche das Gerät nicht in Wasser und setze es nicht fließendem Wasser aus.
- Verwende das Gerät nicht in der Dusche, Badewanne oder unter Dampf.
- Spüle den Power Hub nicht unter fließendem Wasser ab. Nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Der Peeling-Aufsatz kann mit einem Selbstspülzyklus gespült und gereinigt werden.
- Achte darauf, dass der USB-C-Ladeanschluss während des Gebrauchs geschlossen und trocken bleibt.
- Sollten der Power Hub und der DePuffi-Aufsatz nass werden, schalte den Power Hub aus und trockne ihn vollständig, bevor du ihn wieder verwendest.
- Lade das Gerät nicht auf und benutze es nicht, wenn es im Freien gelassen wurde.

Sicheres Aufladen

- Befolge die Anweisungen des Ladegerätherstellers.
- Lade das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf. Verwende kein anderes USB-C-Kabel.
- Überprüfe, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung der Nenneingangsspannung entspricht, bevor du das Gerät anschließt, um die Gefahr von Stromschlägen oder dauerhaften Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Lade das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf.
- Stelle das Gerät immer so auf, dass das Ladegerät während des Ladevorgangs leicht zu erreichen ist.
- Das USB-C-Kabel nach dem Aufladen ordnungsgemäß aufbewahren.
- Verwende einen ordnungsgemäß geprüften SELV PSU Ladeblock, um dieses Gerät aufzuladen.
- Verwende nur ein Universal-Netzteil.
- Ziehe das USB-C-Kabel vorsichtig ab, wenn das Produkt vollständig aufgeladen wurde.

Den Power Hub vor Beschädigungen schützen

- Versuche nicht, den Power Hub zu öffnen oder den Akku auszutauschen.
- Den Power Hub nicht quetschen, brechen, fallen lassen oder beschädigen.
- Stelle die Verwendung ein oder trenne das Ladekabel, wenn sich der Power Hub ungewöhnlich heiß anfühlt oder Rauch oder ein übler Geruch austritt.
- Sollte Flüssigkeit aus dem Power Hub austreten, Kontakt vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen mit viel Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Beachte die Entsorgungshinweise.

PRODUKTWARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Transport- und Lagerbedingungen

- Das Gerät darf nur unter den folgenden Umgebungsbedingungen transportiert und gelagert werden:
 - Zwischen -20 °C und 45 °C aufbewahren. Bei einer Lagerung für mehr als 3 Monate zwischen 0 °C und 25 °C aufbewahren.
 - Zwischen 5 °C und 32 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 85 %, nicht kondensierend, aufbewahren.
 - Zwischen 35 °C und 60 °C bei einem Wasserdampfdruck von bis zu 50 hPa aufbewahren.

Vor jeder Verwendung das Produkt auf Schäden überprüfen

- Das Produkt beim Auspacken und Verwenden nicht fallen lassen.
- Das Produkt vor dem Gebrauch auf Sauberkeit, Korrosion, Risse oder scharfe Kanten prüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn es verschmutzt oder beschädigt ist.
- Den DePuffi-Aufsatz auf Anzeichen von Korrosion prüfen.
- Dies könnte zu Reizungen oder Schäden an deiner Haut führen.

Sachgemäße Reinigung

- Den Peeling-Aufsatz (einschließlich seiner Behälter) und die Spitzen mit Wasser und der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen.
- Den DePuffi-Aufsatz mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nach jeder Sitzung den Selbstspülzyklus ausführen.
- Keine chemischen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Die Aufsätze müssen vor dem Verstauen vollständig trocken sein.

Nicht reparieren oder modifizieren

- Nicht versuchen, das Gerät oder das Zubehör zu reparieren oder zu modifizieren.
- Nicht zerbrechen oder im Feuer entsorgen.
- Keine Sicherheitsvorrichtungen oder Schutzfunktionen modifizieren, deaktivieren oder umgehen. Dies kann Stromschläge, Brände oder schwere Verletzungen verursachen; es führt zum Erlöschen der Garantie und verstößt gegen geltende Sicherheitsvorschriften.

Entsorgung

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Anforderungen zur Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien und-Akkus

Mögliche elektromagnetische Störungen

- **WARNUNG:** Vermeide es, dieses Gerät zusammen anderen Geräten zu benutzen oder mit anderen zu kombinieren, da dies zu Problemen beim Betrieb führen kann. Im Bedarfsfall ist zu überprüfen, ob dieses Gerät und die anderen Geräte ordnungsgemäß in Betrieb sind.
- **WARNUNG:** Wenn Zubehör, Sensoren oder Kabel verwendet werden, die nicht von dem Hersteller dieses Geräts spezifiziert oder bereitgestellt wurden, kann dies zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen, einer verminderten elektromagnetischen Immunität des Geräts oder zu Fehlfunktionen führen.
- **WARNUNG:** Tragbare Hochfrequenz-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten in einem Abstand von mindestens 30 cm zu allen Teilen des Gerätesystems verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller angegebenen Kabel. Andernfalls kann es zu einer Beeinträchtigung der Geräteleistung kommen.
- **WARNUNG:** Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

LIEFERUMFANG

PEELING-KIT •

FÜR EINE PORENTIEFE REINIGUNG



LADE DEN POWER HUB VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUF.

VERWENDE MIT DEINEM FACIALPRO GLOW NUR SHARK HAUTPFLEGEPRODUKTE, UM DIE BESTE WIRKUNG ZU ERZIELEN.

DEPUFFI-KIT •

INSTACHILL & INSTAHEAT



LEGENDE

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Peeling-Aufsatz | 6. Sanfte T-Zonen-Spitze | 10. Selbstspülende Kappe |
| 2. Power Hub | 7. Derm Detox AHA + BHA Peeling-Gel | 11. Reinigungsbürste |
| 3. Normale breite Spitze | 8. Hydro Infuse BHA Hydrator | 12. USB-C-Kabel |
| 4. Normale T-Zonen-Spitze | 9. DePuffi-Aufsatz | 13. Aufbewahrungsbox |
| 5. Sanfte breite Spitze | | |

VOR DEM START

Beurteile den aktuellen Zustand deiner Haut. Lies vor der Verwendung alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. Mache Vorher-Nachher-Bilder, um deinen Fortschritt zu dokumentieren.

WAS IST FACIALPRO GLOW?

FacialPro Glow ist ein Gerät zur Gesichtsbehandlung, mit dem du bequem von zu Hause aus professionelle FacialPro Glow-Ergebnisse erzielen kannst. Unsere Hautpflege-Peeling- und DePuffi-Technologie wurde als All-in-One-System entwickelt, um deine bestehende Routine zu erweitern.

WARUM SOLLTE ICH FACIALPRO GLOW VERWENDEN?


- Professionelle Ergebnisse wie bei einer kompletten Gesichtsbehandlung in nur 9 Minuten
- Unser Gerät und unsere Hautpflegeformeln wurden mit Dermatologen entwickelt
- Wöchentliche und tägliche Momente der Selbstfürsorge
- Verbessert durch eine gründliche Reinigung das Erscheinungsbild von Poren

TESTE DEINE SPITZEN

Siehe Seite 12 für vollständige Details und Beschreibung.

Unsere Spitzen sind so konzipiert, dass sie eine Spitzenleistung und Spitzensaugkraft liefern. Wähle je nach Wunsch entweder den Satz normaler Spitzen oder den Satz sanfter Spitzen aus.

ROUTINE-GENERATOR

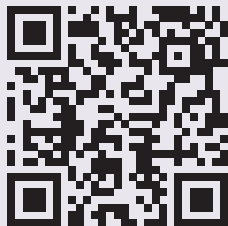

SCANNEN, UM UNSER
ROUTINE-GENERATOR-
QUIZ AUFZURUFEN

WAS DICH ERWARTET

WÄHREND DER VERWENDUNG



HAUTPFLEGE:

Bei der Anwendung der Hautpflegeprodukte kann ein Kribbeln (jedoch kein Brennen) auftreten. Dies ist normal bei Hautpflegeprodukten mit diesen Inhaltsstoffen. Im Laufe der Zeit wirst du ggf. eine Toleranz gegenüber diesen Hautpflegeprodukten entwickeln. Bitte warte 24 Stunden nach einer Rasur, um Irritationen zu verhindern.

SAUGKRAFT:

Die Saugkraft muss nicht aggressiv sein, um beste Ergebnisse zu erzielen. Da das FacialPro Glow-System Peeling-Formeln enthält, wurde die Saugkraft für optimale Ergebnisse entsprechend kalibriert, ohne die Hautbarriere zu beschädigen. Du kannst zwischen 3 Saugstufen und zwischen normalen und sanften Spitzentypen wählen, um dein FacialPro Glow-System individuell anzupassen. Wenn die Spitzen auf derselben Stelle verharren, können feine Blutgefäße reißen. Das ist normal und sollte innerhalb weniger Stunden abklingen. Um dies zu vermeiden, stelle bitte sicher, dass sich deine Spitze bei Kontakt mit der Haut ständig bewegt.

HANDTECHNIKEN:

Es ist wichtig, die richtige Technik zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Achte bitte darauf, dass die Oberfläche der Spitze in engem Kontakt mit der Haut ist. Ja nach deiner Gesichtsförmung muss möglicherweise der Spitzwinkel angepasst werden, um den richtigen Kontakt zu erzielen. Bitte lies die Anweisungen zum Gleiten der Spitzen (Seite 17) aufmerksam durch. Unsere Anleitungsvideos sind ebenfalls sehr hilfreich. Übung macht den Meister!



NACH DER VERWENDUNG

REIZUNG:

Trockenheit/Schuppenbildung ist normal und sollte nach einigen Minuten/Stunden nach der Anwendung wieder abklingen. Wenn dir das unangenehm ist, empfehlen wir, eine niedrigere Saugstufe auszuwählen, weniger Derm Detox aufzutragen oder die Häufigkeit der Verwendung zu verringern, um diesen Effekt zu verhindern. Trage nach der Anwendung immer eine Feuchtigkeitscreme oder einen Sonnenschutz auf.



RÖTUNG:

Während und nach deiner FacialPro Glow-Routine kann es zu Rötungen kommen. Dies ist normal und sollte innerhalb weniger Minuten bis zu einigen Stunden wieder abklingen (die Zeit variiert je nach Hauttyp, Hautton und Empfindlichkeit). Wenn dir die Rötung unangenehm ist, empfehlen wir, diese Routine am Abend durchzuführen. Schließe deine DePuffi-Anwendung mit dem InstaChill-Modus ab. Dies hilft, Rötungen zu reduzieren und die Haut zu beruhigen.



ABSCHÄLEN:

Den Beweis liefert das Abschälen. Am Abschälen erkennst du, dass sich die Hautzellen erneuert haben und Unreinheiten entfernt wurden. Neue Anwender, die weder Peeling noch Salicylsäure gewöhnt sind, sollten innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach Anwendung des Geräts mit einem möglichen Abschälen rechnen. Dies ist völlig normal, da die Wirkstoffe in den Hautpflegeformeln Unreinheiten an die Oberfläche befördern – ein Zeichen, dass das Gerät und die Hautpflegeformeln Wirkung zeigen. Dein Hautzustand sollte sich nach einigen Wochen der Anwendung wieder in einem guten Zustand befinden (je nach Hauttyp, Hautton und Empfindlichkeit).


ERGEBNISSE:

Nach der Verwendung deines FacialPro Glow ist der Schmutzbehälter voll mit überschüssigem Öl, Talg, abgestorbenen Hautzellen und anderen Unreinheiten, die sich in der Haut befunden haben. Wenn Peeling noch neu für dich ist, können die Ergebnisse deiner Haut von Woche zu Woche variieren, basierend auf deinem aktuellen Hautzustand, Umweltfaktoren und Hormonen. Das ist ganz normal!

REIFE HAUT

Reife Haut ist typischerweise empfindlicher. Bei der Verwendung dieses Geräts kann es zu einer stärkeren Rötung oder Reizung kommen. Wenn solche Reaktionen bei dir auftreten, warte am besten länger als eine Woche bis zu deiner nächsten Anwendung. Wir empfehlen, mit einer niedrigeren Saugintensität fortzufahren und die sanfte Spitze zu verwenden. Auch auf die richtigen Handtechniken kommt es an (wie etwa die Haut bei der Verwendung des Geräts straff zu ziehen).

JEDE TASTE ERKLÄRT

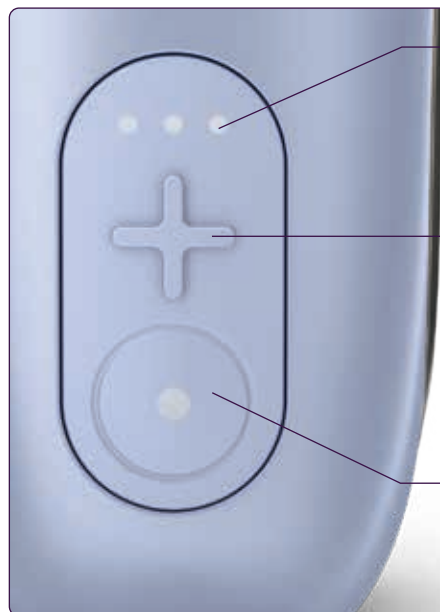

INTENSITÄTSANZEIGE
LED-Leuchten zeigen eine niedrige, mittlere oder hohe Stufe an.

NIEDRIG MITTEL HOCH

TASTE „INTENSITÄT“
Drücken zum Ändern der Intensitätseinstellungen.

Peeling-Aufsatz:
Ändert die Saugkraft.

DePuffi-Aufsatz:
Ändert die Temperatur.

EIN/AUS-TASTE
Ein/Aus Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
Pause/Fortsetzen der Ansaugung Kurzes Drücken
Zwischen **INSTACHILL** & **INSTAHEAT** wechseln
Kurzes Drücken



ENTRIEGELUNGSKNOPF
Drücken zum Lösen und Austauschen von Aufsätzen.

USB-LADEKABEL
Abdeckung zum Anschließen anheben.

Lade den Power Hub vor dem ersten Gebrauch für 3 Stunden 55 Minuten auf.

OPTIMALE ANPASSUNG

Bei der Entwicklung aller Spitzen stand die Leistung im Vordergrund. Dermatologisch getestet, für gereinigte Poren und eine feuchtigkeitsgepflegte, strahlende Haut.

Wähle je nach deinen Vorlieben entweder die normalen oder die sanften Spitzen aus. Die Spitzen vor dem ersten Gebrauch mit Wasser abspülen.



SCANNEN,
UM ANLEITUNG
ANZUZEIGEN

		NORMAL	SANFT
		Für die meisten Hauttypen	Für empfindliche Hauttypen
		Entwickelt für ein Gefühl von stärkerer Saugkraft mit Peeling	Entwickelt für ein Gefühl von leichter Saugkraft mit Peeling
BREITE SPITZE Zur Anwendung auf Wangen, Kieferpartie und oberer Stirn.			
T-ZONEN-SPITZE Zur Anwendung auf der T-Zone: Nase, Kinn und um die Augenbrauen.			

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Wähle zum Starten entweder die normale oder sanfte Spitze.
- Setze den Peeling-Aufsatz auf dem Power Hub auf, fülle sauberes Wasser ein und schalte das Gerät ein.
- Führe an einem kleinen Teil des Gesichts (je nachdem, Wange oder T-Zone) einen Test durch.
- Wechsle zu einem anderen Spitzen-Set und wiederhole die obigen Schritte. Wähle dein Spitzen-Set nach deinem bevorzugten Hautgefühl.
- Wenn du das Beste für dich gefunden hast, bewahre das ausgewählte Spitzen-Set wie abgebildet in deiner Aufbewahrungsbox auf.



Überprüfe deine Spitze nach jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Wenn du Veränderungen an der Spitze oder eine Leistungsänderung feststellt, empfehlen wir, die Spitzen zu ersetzen.


AUF SHARKCLEAN.DE KANNST DU NEUE NORMALE UND SANFTE SPITZEN BESTELLEN



GLEITEN MIT BREITER SPITZE

Zur Anwendung auf Wangen, Kieferpartie und oberer Stirn. Wir empfehlen, die breite Spitze für 2 der insgesamt 3 Minuten von Schritt 2 und 3 zu verwenden.


- Setze die Spitze auf deine Wange, deinen Kiefer oder deine obere Stirn mit sanftem Andruck für einen festen Kontakt mit der Haut.
- Bei jeder Bewegung wirst du ein Saugen spüren und einen weichen „Kuss“ hören.
- In kurzen, sanften Zügen von etwa 2 bis 5 cm Länge bewegen.
- Verwende die freie Hand, um die Haut sanft für ein leichteres Gleiten zu straffen.

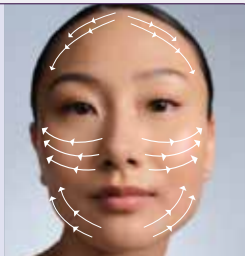

GLEITEN MIT DER T-ZONEN-SPITZE

Zur Anwendung auf der T-Zone: Nase, Kinn und um die Augenbrauen. Wir empfehlen, die T-Zonen-Spitze für 1 der insgesamt 3 Minuten von Schritt 2 und 3 zu verwenden

- Setze die präzisere Spitze auf Nase, Kinn und zwischen die Augenbrauen mit sanftem Andruck für einen festen Kontakt mit der Haut.
- Bei jeder Bewegung wirst du ein Saugen spüren und einen weichen „Kuss“ hören.
- In kurzen, sanften Zügen von etwa 2 bis 5 cm Länge bewegen.
- Verwende die freie Hand, um die Haut sanft für ein leichteres Gleiten zu straffen.

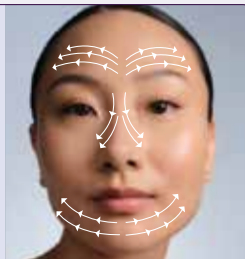

FÜHRE EINEN SELBSTSPÜLZYKLUS DURCH

Nach jedem Gebrauch ausführen

1. Den Reinbehälter und den Schmutzbehälter ins Waschbecken ausgießen.
2. Reinbehälter mit kaltem Wasser füllen.
3. Die selbstspülende Kappe auf den Peeling-Aufsatz aufsetzen.
4. Prüfen, ob sich die Behälter im Power Hub befinden, und das Gerät einschalten.
5. Gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Intensitätstaste drücken, um den Selbstspülzyklus zu starten.
6. Behälter entleeren und mit der Reinigungsbürste und kaltem Wasser abreiben.
7. Den Verschluss der Rein- und Schmutzbehälter offen lassen, bis das Gerät vollständig trocken ist.



EXPERTENTIPP: Wenn du dein Gerät für mehr als 2 Wochen nicht verwendet hast, führe einen Selbstspülzyklus vor der nächsten Verwendung durch.
Die Kombination aus breiter und T-Zonen-Spitze stellt sicher, optimale Ergebnisse in allen Bereichen des Gesichts zu erzielen.

WAS IST IN MEINEM BEHÄLTER?

Wirf **nach** deiner wöchentlichen Pro Glow-Routine einen Blick in den Schmutzbehälter. Du solltest überschüssiges Öl, Talg, abgestorbene Hautzellen an der Oberfläche und/oder andere Unreinheiten sehen, die sich in deiner Haut festgesetzt haben.

Die Ergebnisse variieren je nach Ausgangszustand deiner Haut, Umgebung und Hormonen. Denke daran, dass Mitesser üblicherweise von professionellen Kosmetikerinnen manuell extrahiert werden. FacialPro Glow hilft, Ablagerungen zu verhindern, die Mitesser verursachen, entfernt sie aber nicht.



TRÜB

- Du hast überschüssiges Öl entfernt.

RÜCKSTÄNDE

- Du hast abgestorbene Hautzellen oder Unreinheiten entfernt.

KLAR

- Deine Haut ist frei von Verstopfungen.

MAKE-UP

- Du hast überschüssiges Make-up oder Sonnenschutz entfernt.


Jetzt ist es an der Zeit, dein Gerät zu reinigen. Beginne mit dem Selbstspülzyklus.
Einzelheiten siehe Seite 17.

REINIGUNG



PEELING-AUFSATZ

- Führe einen Selbstspülzyklus durch. Ausführliche Informationen siehe Seite 55.
- Verwende nach dem Abnehmen der selbstspülenden Kappe eine Reinigungsbürste, um den Spitzen-Aufsatz und den Behälterbereich zu säubern (einschließlich der Spalte in den Behälterverschlüssen).

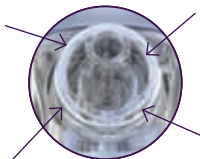

SPITZEN

- Spitzen entfernen, unter Wasser abspülen und mit der Reinigungsbürste abscrubben.



DEPUFFI-AUFSATZ

- Wische die Metalloberfläche mit einem feuchten Tuch ab.



POWER HUB

- Wische die Außenseite des Power Hubs mit einem feuchten Tuch ab, um überschüssige Rückstände zu entfernen.



AUFBEWAHRUNGSBOX

- Wische die Box mit einem feuchten Tuch ab und lasse sie vollständig an der Luft trocknen.

HINWEIS

- Lasse alle Teile vor dem Verstauen gründlich an der Luft trocknen.
- Das Gerät nicht mit Wasser oder Schmutzwasser verstauen.
- Verwende keine Seife in deinen Behältern, da dies zu Schaumbildung im Geräteschlauch führen kann.
- Stelle keine Gerätekomponten in die Box, wenn diese noch nass oder feucht sind.



SCANNEN,
UM ANLEITUNG
ANZUZEIGEN

LADEN UND AUFBEWAHREN



! Eine gelbe Signalleuchte zeigt an, dass der Akku deines Geräts bei Verwendung zu 25 % geladen ist.



! Eine gelb blinkende Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird.

Während des Ladevorgangs leuchten die Intensitätsleuchten nacheinander gelb auf, um den Ladezustand des Power Hubs anzuzeigen (z. B. 1 gelbe Intensitätsanzeige = zu 33 % geladen).



Eine grüne Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Alle Intensitätsleuchten erlöschen.

AUFLADEN

- Vergewissere dich, dass das Gerät ausgeschaltet und trocken ist.
- Entferne die Abdeckung vom USB-C-Ladeanschluss und schließe das USB-C-Kabel an.
- **Verbinde das USB-C-Kabel mit einem 5-V-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) und stecke dieses in die Steckdose.**
- Führe einen vollständigen Ladezyklus durch – dies sollte etwa 3 Stunden und 55 Minuten dauern.
- Bei täglicher Anwendung sollte der Akku eine ganze Woche halten.



KORREKTES AUFBEWAHREN


- Achte darauf, dass Gerät und Zubehör vollständig getrocknet und demontiert sind.
 - Lege alle Komponenten in die Aufbewahrungsbox.
 - Lasse das Gerät bis zum nächsten Gebrauch auf deiner Badezimmerablage oder an einem anderen Ort deiner Wahl stehen.
- Expertentipp:** Der Deckel der Aufbewahrungsbox passt unter ihren Boden. Auf diese Weise kannst du dein FacialPro Glow präsentieren!



HAUTPFLEGE

Von Dermatologen getestete, koreanische Hautpflege-Formeln. Verwende nur die Hautpflegeprodukte, die mit deinem Gerät geliefert werden.

DERM DETOX

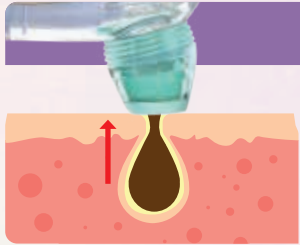

FUNKTIONSWEISE UND VORTEILE

Nach dem Auftragen auf die Haut in Schritt 1 helfen die Glykol-, Milch- und Salicylsäure in der Derm Detox-Formel dabei, überschüssige, abgestorbene Hautzellen und Talg auf der Hautoberfläche sanft aufzuweichen und aufzulösen. Deine Haut sollte sich glatter anfühlen und strahlender aussehen. Das Entfernen dieser ersten Schicht ermöglicht ein gründlicheres Peeling und eine Porenreinigung in Schritt 2.

3 MIN. AHA + BHA PEELING-GELMASKE

20 ml/0,66 fl. oz.



HAUPTBESTANDTEILE:

Glykolsäure

Alpha-Hydroxysäure (AHA)*, die beim Peeling der Haut hilft, um eine glatte Textur und einen gleichmäßigen Hautton zu erzielen.

Salicylsäure

Eine Beta-Hydroxysäure (BHA), die hilft, die Poren intensiv zu reinigen und Verstopfungen zu beseitigen.

Allantoin

Ein Antioxidans, das die Haut beruhigt.


* Warnung: Warnhinweis zu Sonnenbrand auf Seite 4

Alle unsere Hautpflegeprodukte wurden mit Dermatologen entwickelt, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

HYDRO INFUSE

FUNKTIONSWEISE UND VORTEILE

Der Saugdruck der Extraktion leitet Verstopfungen (die durch das Derm Detox Peeling-Gel gelöst wurden) sanft von deiner Haut ab. Am besten verwendest du die Präzisionsspitze an deiner T-Zone. Das Hydro Infuse Hautpflegeprodukt spendet deiner Haut während der Anwendung Feuchtigkeit. Schmutz wird in den Schmutzbehälter des Geräts gesaugt – schaue ruhig nach!

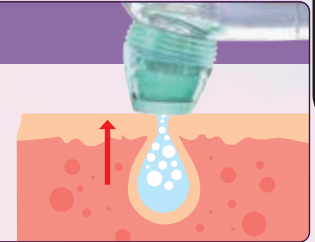

PORENVERFEINERnde FEUCHTIGKEITSLÖSUNG

80 ml/2,66 fl. oz.

HAUPTBESTANDTEILE:

Salicylsäure

Eine Beta-Hydroxysäure (BHA), die hilft, die Poren intensiv zu reinigen und Verstopfungen zu beseitigen.

Hyaluronsäure

Ein Feuchthaltemittel, das hilft, die Hautfeuchtigkeit zu erhöhen.

Sowohl **FacialPro Glow** als auch **Shark Hautpflegeprodukte** wurden gleichzeitig als ein System entwickelt – dies ist die einzige Möglichkeit, die besten Ergebnisse für die Haut zu garantieren.



ZUM NACHKAUF BESUCHE SHARKCLEAN.DE

Verwende mit dem FacialPro Glow-System nur diese Hautpflegeprodukte.

2 JAHRRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR FH320EU, FH320EUPL, FH320EUBK

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von 2 Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Shark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Shark-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die 2 Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in Deutschland gekauft wurden.

Die Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **sharkclean.de**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Produkt bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **sharkclean.de**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **sharkclean.de**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Produkts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Produkt erfolgt.
- Gebrauch des Produkt zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Produkt her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Produkt auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark- Produkte finden Sie unter **sharkclean.de**